

IKA

designed for scientists

CN




智能称重 | IKA [scale]

IKA [scale]

/// 首创的支架天平

集成天平和数据接口的支架：仅 IKA 提供。IKA [scale] 为您的实验室应用提供更高的舒适度和安全性。例如，您的搅拌器可以安装在稳定的支撑杆上。在搅拌过程中，可以称量要加入的样品量并连续记录。

专利：IKA [scale] 是市场上独一无二的！

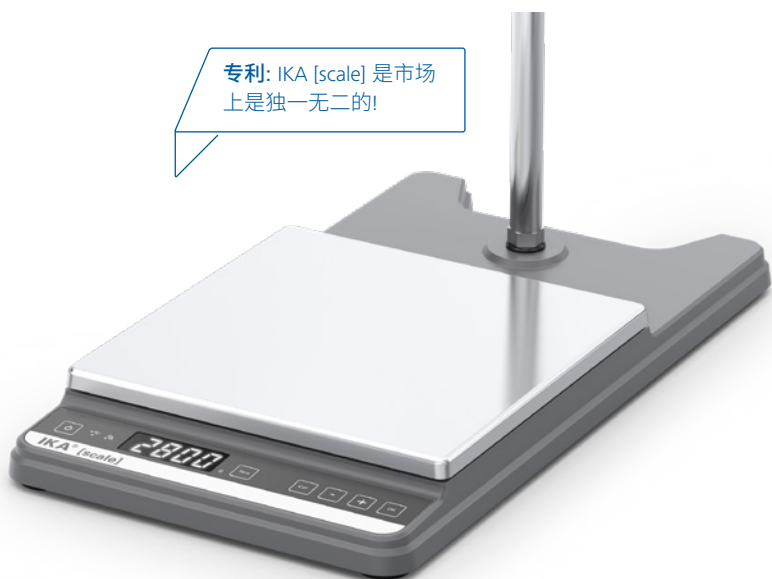

称量重量可达 6 公斤

智能支架天平的称重范围可达 6 kg，分辨率为 1 克。因此特别适用于在搅拌的同时直接控制添加样品材料。

清晰的显示

使用清晰的 LCD 显示屏，非常方便用户使用。所有信息，无论是测量值，校准步骤还是状态信息，都清楚地显示出来。

稳定的安装底板

坚固的压铸锌外壳提供了稳定性和坚固性。

蓝牙连接

测量的样品重量可以直接转移到您的仪器上(例如 IKA Ministar / Microstar 系列)，并显示在其显示屏上。

技术参数

过载保护	是
外形尺寸 (W × H × D)	215 × 45 × 390 mm
重量	3.0 kg
允许环境温度	5 – 40 °C
允许相对湿度	80 %
防护等级 DIN EN 60529	IP 21
接口	USB
电压	100 – 240 V
频率	50/60 Hz

IKA [scale]

订货号 0025004318

IKA Works Guangzhou

艾卡 (广州) 仪器设备有限公司
广州经济技术开发区友谊路 173 号 – 175 号
电话: +86 20 8222 6771, 服务热线: 400 886 0358
邮箱: info@ika.cn, 阿里巴巴: ikashop.1688.com



www.ika.com



IKAworldwide // #lookattheblue

