

# IKA

designed for scientists

DE




INTELLIGENTER WIEGEN | IKA [scale]

# IKA [scale]

/// Die erste Stativ-Waage ihrer Art

Ein Stativ mit integrierter Laborwaage und Datenschnittstelle: Das gibt es nur bei IKA. IKA [scale] sorgt für mehr Komfort und Sicherheit bei Ihren Laboranwendungen. An die stabile Stativstange hängen Sie zum Beispiel Ihr Rührwerk. Die hinzugefügten Probenmengen werden sogleich gewogen und während des Rührprozesses fortlaufend dokumentiert.

Patentiert: IKA [scale] ist einzigartig auf dem Markt!

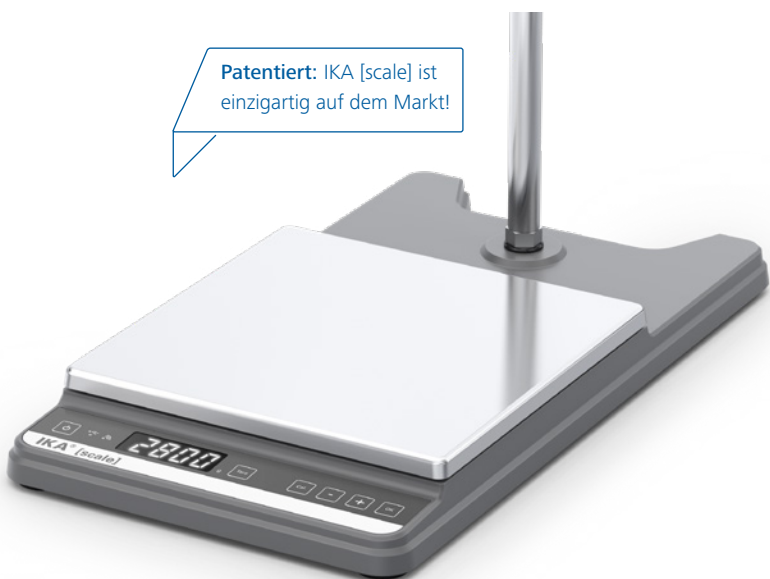

## Bis zu 6 kg Probengewicht

Die intelligente Stativ-Waage hat einen Wägebereich von bis zu 6 kg bei einer Auflösung von 1 g. Sie eignet sich damit besonders für die direkte und kontrollierte Zugabe von Probenmaterial während eines Rührvorgangs.

## Übersichtliches Display

Die Arbeit mit dem modernen LCD-Display ist besonders anwenderfreundlich. Ob Messwerte, Kalibrierschritte oder Statusmeldungen, alles bleibt übersichtlich.

## Stabile Aufstellfläche

Durch ein massives Zinkdruckgussgehäuse erhält das Gerät seine Stabilität und Robustheit.

## Bluetooth Verbindung

Das gemessene Gewicht kann direkt an ein geeignetes Gerät (z.B. die IKA Mini-/Microstar-Serie) übermittelt und auf dem Display angezeigt werden.

### TECHNISCHE DATEN

Schutz vor Überlast	Ja
Abmessungen (B x H x T)	215 x 45 x 390 mm
Gewicht	3,0 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	5 – 40 °C
Zulässige Relative Feuchte	80 %
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 21
Schnittstelle	USB
Spannung	100 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz

IKA [scale]

Ident-Nr. 0025004318